



AUGEN MASSAGER

Bedienungsanleitung zu PG2404G5



Anleitung unbedingt vor dem Gebrauch durchlesen und die
Vorsichtsmassnahmen auf Seite 4 beachten

>> Produktbeschreibung

Entwickelt basierend auf menschlicher Technik und physikalischer Massageerfahrung ist der PG-2404G5 (nachfolgend Massager genannt) ein integriertes, intelligentes Augenmassagegerät das hauptsächlich zur Massage von Schläfen und anderen Akupressur Punkten verwendet wird.

Es werden Punkte im Augenbereich durch Querkirkulation der pneumatischen Massage, der vibrierender Ballmassage und heißer Komresse zur Linderung von Augenermüdung und Entspannung verwendet, die den Anwender physikalisch und mental entspannen.

Da das Produkt mit beruhigender Musik gestattet ist, werden Sie sich während der Massage tiefentspannen.

Der Massager, eine kleine Krankenschwester für die Augenpflege mit Gold/weißem Kragen.

Der Massager, ist durch die Form einer Brille gekennzeichnet und ausgestattet mit eingebauter wieder aufladbarer Batterie; er ist kompakt und zusammenklappbar, mit modischen Design.

Er ist angenehm zu tragen, leicht zu tragen und kann verwendet werden wann und wo immer möglich.

>> Zielpublikum

Der Massager ist für Studenten, Bürofachleute, Bankangestellte, Manager und IT Fachleute gedacht, die oft am PC arbeiten und ihre Augen damit lange Zeit belasten.

>> Merkmale

Pneumatische Massage: Stimulierung der Akupunkturpunkte im Augenbereich durch Kontraktion und Entspannung mittels Luftkissens.

Vibrierende Massage: Simuliert Hämmern, Shiatsu und andere traditionelle Massagen.

Heiße Komresse: Mit schnellem Temperaturanstieg und konstanter Temperaturregelung wird die Blutzirkulation im Augenbereich beschleunigt.


Integriertes und faltbares Design: Damit ist der Massager in der Lage, die Augenregion näher zu kontaktieren und ist bequem zu tragen.

Bedienung: Einfache Ein-Tasten-Bedienung, LCD-Display mit weißer Hintergrundbeleuchtung.


Ausgestattet mit abnehmbarem und waschbarem Tuch, damit Schmutz und Schweiß vermieden werden kann, dies macht die Anwendung komfortabler.

>> Beschreibung Bedienelemente


Front Ansicht

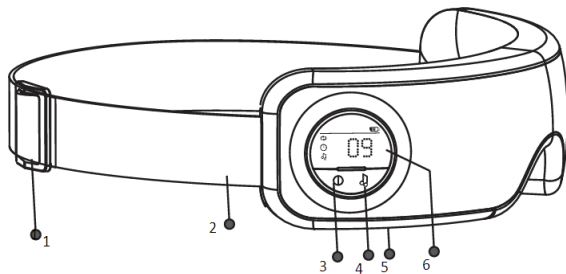

1. Elastikband Einstellung
2. Elastikband
3. Ein/Betriebsmodus/Aus Taste
4. Musik Taste
5. USB Ladebuchse
6. LCD Anzeige

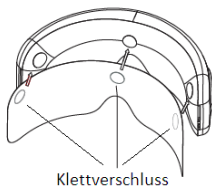

Klettverschluss

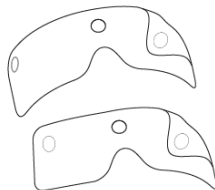

washbare Schutzüberzüge

>> Packungsinhalt

- 1 Augenmassager
- 1 USB Kabel
- 1 Tragbeutel
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 CE conformity
- 2 waschbare Schutzüberzüge

>> Vorsichtsmaßnahmen

- Bitte lesen und verstehen Sie die Einführungen vollständig, bevor Sie das Massagegerät in Betrieb nehmen.
- Bitte reinigen Sie den Schutzbezug des Massagegerätes vor dem Gebrauch.
- Kinder und andere Personen ohne Ausdrucksfähigkeit dürfen das Massagegerät nicht benutzen.
- Diejenigen, die empfindliche Haut haben oder unempfindlich gegen Hitze sind, dürfen das Massagegerät nicht benutzen.
- Schwangere Frauen, Patienten mit Herzerkrankungen, Dysarteriotonie, bösartige Erkrankungen, Tumor, Schädel-Gefäß-Erkrankungen und andere akute Erkrankungen und solche, die in ärztlicher Behandlung sind dürfen das Massagegerät nicht benutzen.
- Hören Sie sofort auf, das Massagegerät zu benutzen, wenn Sie sich unbehaglich fühlen oder sich Ihre Haut während des Gebrauchs abnormal anfühlt und konsultieren Sie einen Arzt.
- Wenn Sie Augenprobleme haben oder jemals Augenoperationen ausführen liessen (Glaukom, Katarakt, Netzhautablösung und anderen Augenerkrankungen) dürfen das Massagegerät nicht benutzen.
- Wenn Sie Kontaktlinsen tragen, können Sie das Massagegerät erst dann benutzen, wenn Sie die Kontaktlinsen herausnehmen.
- Verwenden Sie das Massagegerät nicht an Orten mit hoher Temperatur, brennbarer oder feuchter Umgebung oder an Orten mit elektromagnetischer Strahlung.
- Demontieren Sie das Massagegerät nicht ohne Erlaubnis; stellen Sie sicher, dass das Gerät unbeschädigt ist.

>> Bedienung

Vorbereitungen vor dem Gebrauch

1. eingebaute wieder aufladbare Batterie

Drücken Sie kurz die "ⓘ" Taste um den Massager einzuschalten und den Ladezustand der Batterie zu prüfen.


Niedriger Batteriestatus: wird angezeigt, wenn das "🔋" Batteriesymbol leer anzeigt und ein 3 maliges klick zu hören ist oder das Display sich gar nicht einschaltet.

In diesem Falle, bitte zuerst den Massager vollständig aufladen indem das USB Kabel mit der einen Seite mit dem Massager und das andere Ende mit einem PC oder einem USB Ladegerät verbunden wird. Die Ladedauer beträgt bis zu 4 Stunden am PC oder ca. 2 Stunden mit dem Ladegerät.



2. Verwendung des Massagers

Befestigen Sie den abnehmbaren und waschbaren Schutzüberzug an der Innenseite des Massagers gemäß Abbildung und achten Sie auf die Positionen von drei Klettverschlüssen, um das Tuch zu fixieren. Richten Sie dann den Massager und die Augen aus und tragen Sie den Massager; stellen Sie das Elastikband auf eine bequeme Position ein.

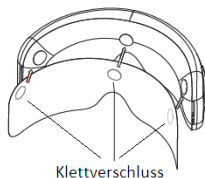

>> Erklärung der Tasten und Symbole

1. Tasten

- “⏻” Taste: Ein/Betriebsmodus Schalter; kurz drücken: einschalten, nochmaliges kurzes drücken: Betriebsmodus umschalten. Lange drücken um auszuschalten
- “🎵” Taste: Musik Funktion Taste



2. Symbole (in der LCD Anzeige)

Linke Seite

- “⏻” mode: Betriebsmodus Anzeige;
- “🕒” time: Timer
- “🎵” music: Start/Stop Musik Wiedergabe;



oben

- “air” Symbol: Zeigt die pneumatische Massagefunktion an.
- “heat” Symbol: Zeigt die Heizfunktion an.
- “vib.” Symbol: Zeigt die Vibration Massagefunktion an.
- “🔋” Symbol: Batterie Status Symbol: Zeigt den Batterie- und Ladezustand an.

“08 min”: zeigt die Restzeit der Massagesitzung an

>> Behandlung

1. Taste "①" drücken um den Massager zu starten, der LCD Screen schaltet ein und der Betriebsmodus 1 startet. Betriebsmodus 1 umfasst:
 - pneumatische Massage
 - Heizfunktion
 - Musik Wiedergabe
 - Timer 15 minuten

Die LCD Anzeige zeigt "air" und "heat".

2. Taste "①" nochmals drücken, um die 5 Betriebsmodi durchzuwählen. Bei jedem Druck der "①" Taste wird der nächste Betriebsmodus gewählt, bis der erste wieder erreicht ist.
Die 5 Betriebsmodi sind:

- Mode 1: pneumatische Massage + Heizfunktion
- Mode 2: pneumatische Massage + Heizfunktion + Vibrationsmassage
- Mode 3: pneumatische Massage + Vibrationsmassage
- Mode 4: pneumatische Massage
- Mode 5: Heizfunktion

Drücken Sie die Taste "①" für 2 Sekunden um den Massager auszuschalten.

3. Verwendung der Musik Funktion "🎵" Taste
 - Um die Musikfunktion zu aktivieren, die Taste "🎵" 2 Sekunden drücken, im Display wird „🎵 music“ angezeigt und die Wiedergabe beginnt.
 - Bei aktivierter Musikfunktion, die Taste "🎵" drücken um zum nächsten Titel zu gelangen.
 - Bei aktivierter Musikfunktion, die Taste "🎵" schnell 2 mal drücken (Doppelklick) um die Lautstärke anzupassen. Standard Lautstärke ist „laut“. Sie können zwischen „laut“, „mittel“ und „leise“ wählen, bei jeden schnellen Doppelklick wird die Lautstärke verändert.
 - Um die Musikfunktion zu deaktivieren, die Taste "🎵" 2 Sekunden drücken.

>> Musik auf den Massager laden

Verbinden Sie das USB Kabel mit der einen Seite mit dem Massager und das andere Ende mit einem PC. Kopieren Sie MP3 Files in den Ordner des Massagers. Es stehen 115MB freier Speicher zur Verfügung.



Hinweis: Der Massager unterbricht die Massage wenn er mit dem USB Kabel verbunden wird.

>> Reinigung und Aufbewahrung

- Um den Massager zu reinigen, darf nur ein sauberes, weiches Baumwolltuch verwendet werden, das leicht angefeuchtet werden kann. Keine Reinigungsmittel verwenden.
- Den Massager an einem trockenen und belüfteten Ort aufbewahren.
- Den Massager keinem direktem Sonnenlicht aussetzen und vor hohen Temperaturen bewahren.


>> Reinigung der Schutzbezüge

- Wischen Sie Schweißflecken und andere Flecken von dem Schutzbezug ab. Verwenden Sie dazu ein leicht feuchtes Tuch.
- Der Schutzbezug ist waschbar. Bitte beachten Sie die folgenden Punkte, bevor Sie die den Schutzbezug waschen:
 - Nur Handwäsche, nicht mit der Maschine waschen.
 - Scrubben Sie es nicht gewaltsam während der Reinigung.
 - Zum Trocknen nicht auswringen;
 - Keine Verwendung von Entfärber;
 - Keine Dehydrierung oder Trocknung;
 - Kein Bügeln;
 - Hängen Sie es an die Luft zum Trocknen.

>> Pflege des eingebauten Akkus

Ein niedriger Batteriestand der eingebauten Lithium-Batterie wird angezeigt, wenn der Summer drei Mal tickt oder die Batteriezustandsanzeige "  " im Display anzeigt während Sie das Massagegerät benutzen. Zu diesem Zeitpunkt müssen Sie das USB-Kabel verwenden und die Batterie wieder aufladen.

Während dem Aufladen flackert das vierstufige Symbol für den Akkustand.

Nachdem der Akku vollständig geladen ist, wird das Batteriestandsymbol "  " angezeigt. Es braucht ca. 2h zum Laden der Batterie.

Der vollgeladene Akku kann für 4-5 Tage (15 min pro Tag) verwendet werden.

Normalerweise beträgt die Lebensdauer der aufladbaren Batterie 500 Ladyzyklen was etwa 3 Jahre bedeutet.

Die Lebensdauer wird verkürzt, wenn die aufladbare Batterie über längere Zeit nicht verwendet wird. Es wird empfohlen, die Batterie mindestens einmal im Monat aufzuladen.

>> Produkteigenschaften

Name: Eye massager

Model: PG-2404G5

Stromversorgung: 5 V DC 1A (USB) 5W

Lithium Batterie: 3.7 V, 1,450 mAh

Verpackung: 219 x157 x 88 mm

Gewicht: ca. 660 g

>> Wissenschaftliches Wissen:

Verhindern Sie das "Computer Vision Syndrom".

Menschen fühlen sich unwohl, wenn sie den Computer für eine lange Zeit benutzen.

Augenärzte und Augenoptiker nennen es "Computer Vision Syndrom".

(CVS)". Details zu CVS sind wie folgt:

Die Augenermüdung wird verschlimmert, wenn es für eine lange Zeit nicht blinkt

(unbewegte Bilder) während ein Bildschirm betrachtet wird.

Dieser Umstand ist oft der Fall, wenn viele Dateien gelesen werden.

Hinweise und Tipps wie Sie Büroarbeit gesund verrichten können finden Sie bei SUVA Pro unter diesem Link:

<https://www.suva.ch/de-CH/material/Dokumentationen/bildschirmarbeit-wichtige-informationen-fur-ihr-wohlbefinden/>

>> Notizen:

Import und Vertrieb:

Werax Service AG
Winkel 22
CH-8192 Glattfelden



www.werax.ch



info@werax.ch